


Case : 405

走行中車いすけん引装置が外れ、バランスを崩し転倒しそうになる

場面の説明

車いすとの接続固定が不十分だったため段差の振動で片方が外れ、バランスを崩した

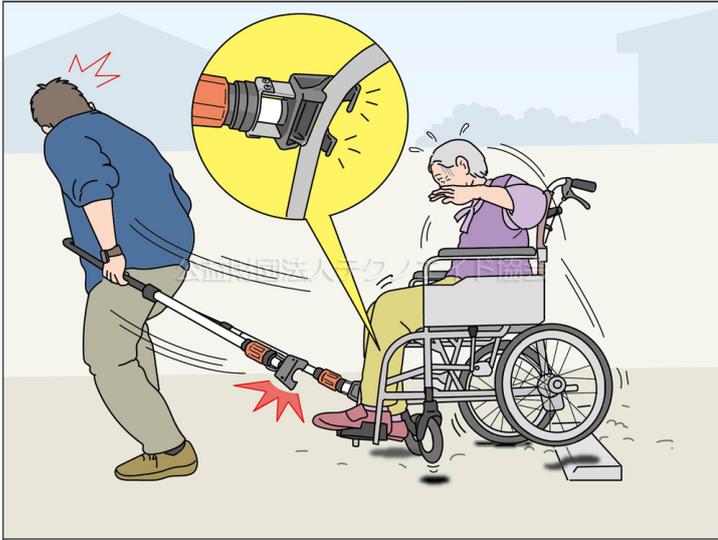

利用シーン	 移動  外出
主な利用場所	 その他
介護保険の種目	 車いす付属品
分類コード (CCTA95)	122489 (その他の車いす用品)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

車いすけん引装置は、不整地や段差部の通過等の際に効果を発揮する用具で、非常時の避難器具としても活用されています。車いすとの接続固定部分には強い力がかかるので、確実な装着とねじの締め込みが求められます。万一装着が不十分でも外れにくい構造になっていますが、そのまま使い続けると接続部分が変形するなどして、振動などで外れてしまうこともあり危険です。変形がないかなど日ごろからの点検も重要です。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：適切な固定方法を理解していなかった
- 人：部品の変形に気づいてもけん引できるので大丈夫だと思っていた
- モノ：不十分な接続でもけん引できる構造だった
- モノ：不適切な装着で部品に変形が生じていた
- 管理：不十分な装着がなされていることを把握できていなかった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 405

走行中車いすけん引装置が外れ、バランスを崩し転倒しそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

車いすとの接続固定が不十分だったため段差の振動で片方が外れ、バランスを崩した

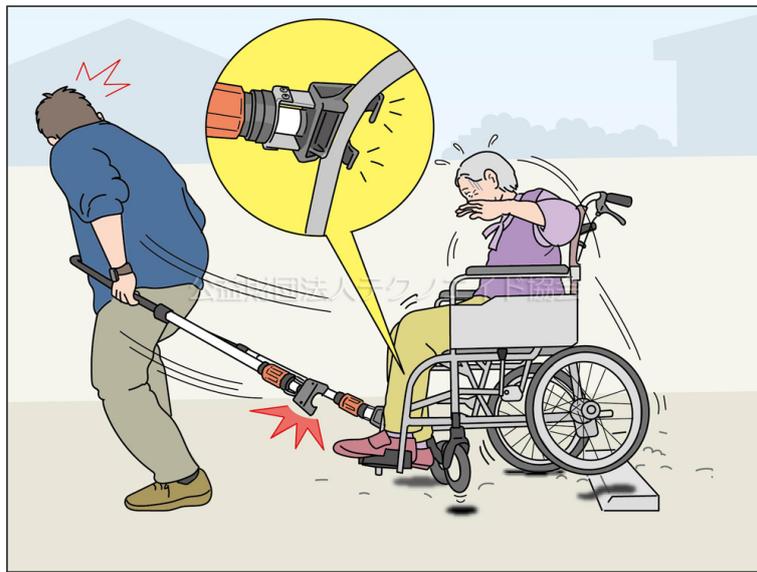

どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ