


Case : 82

車いすごとつり上げてしまい、バランスを崩し転落しそうになる

場面の説明

車いすのアームサポートにつり具を巻き込んでしまったことに気がつかなかった

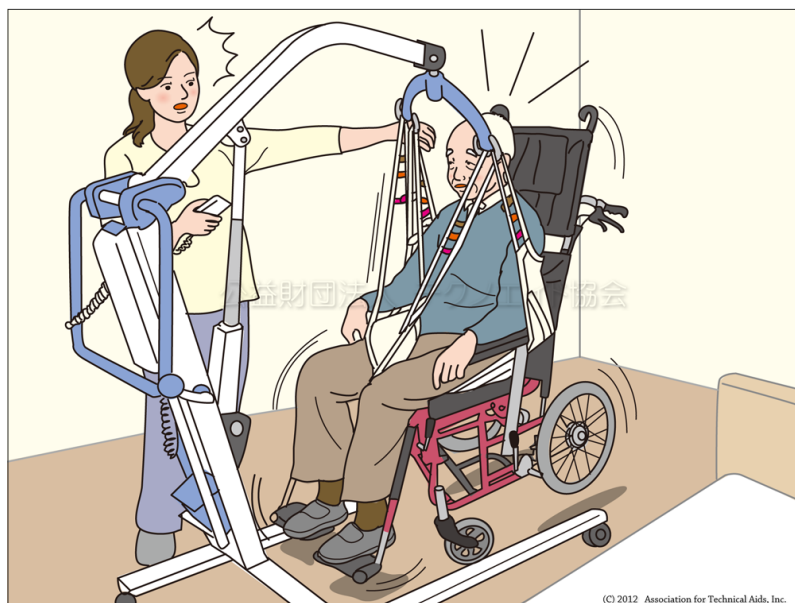

利用シーン

移乗

主な利用場所

寝室

介護保険の種目

移動用リフト（つり具の部分を除く）

分類コード(CCTA95)

123603(吊り上げ式床走行リフト)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

アームサポートだけでなく、ブレーキレバーなどでも起こりうる事例です。つり具の装着後、確認することが重要です。万が一、巻き込んでしまっても、落ち着いて一度下げてからやり直すことで事故を防げます。つられた状態で巻き込みを外すことは危険です。

参考要因

人：介助者がつり具や利用者をよく見ていなかった

人：つり始めにいったん停止して確認する手順を忘れていた

環境：つり具で巻き込みやすい形状のアームサポートの車いすを使用していた