
福祉用具ヒヤリハット情報

Case：89

ポータブルトイレを支えにベッドから立ち上がろうとして、転倒しそうになる

場面の説明

ポータブルトイレの肘掛けに体重をかけてベッドから立ち上がろうとしたところ、ポータブルトイレが倒れてしまった

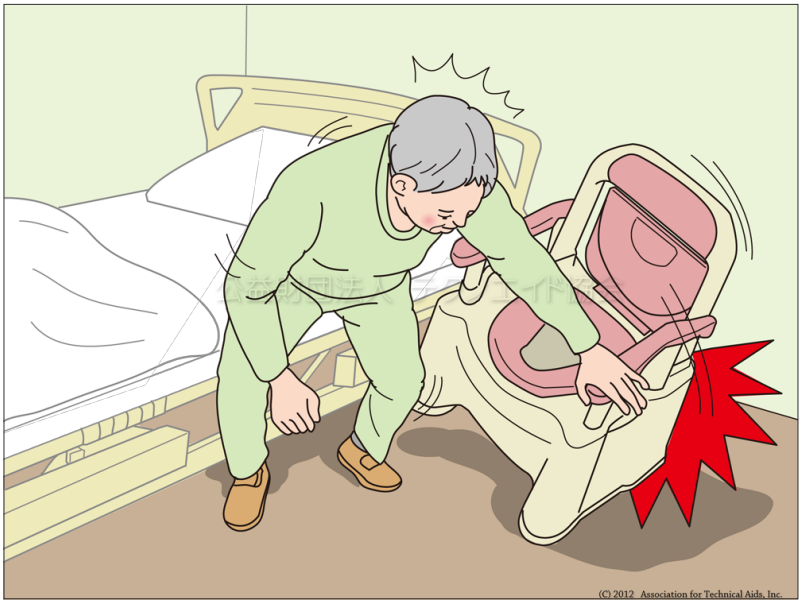

利用シーン	移乗 立ち座り 排泄
主な利用場所	寝室
介護保険の種目	腰掛便座
分類コード(CCTA95)	091203(ポータブルトイレ)
介護テクノロジー	－
二次元バーコード	

解説

ベッドから立ち上がるときに、ポータブルトイレに限らず、家具につかまり立ち上がる場面を多く見かけますが、それが安全であるかどうかは常に注意を払い確認する必要があります。木製のような重量のあるポータブルトイレを利用することで安定感が増しますが、基本的にはベッド用グリップや床置き形手すりなどを利用してください。

参考要因

人：立ち上がるときに何か支えが必要だった
モノ：立ち上がりの補助となるほど安定はしていなかった
環境：立ち上がりのためのベッド用グリップなどが設置されていなかった

Copyright 2000-2012 Association for Technical Aids, Inc. All rights reserved.