
### 福祉用具ヒヤリハット 研修教材 (講師用)

Case: 117

前向きで下りたところフットサポートが地面にひっかかり、転落しそうになる

#### 場面の説明

前向きで下りたため、フットサポートが地面にぶつかってしまった

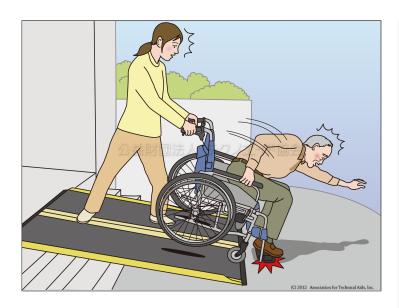

利用シーン	ÅÅ	移動
	RESORVE	階段の昇り降り
	ÅÅ	外出
主な利用場所		階段
	mz mz	玄関
	RE-NG	段差・縁石
介護保険の種目	×0-7	スロープ
分類コード (CCTA95)	1830	15 (携帯用スロープ)
介護テクノロジー	_	
二次元バーコード		

#### 解説

スロープを下りるときには、車いすを後向きに介助することが基本です。それは万が一このような事象が起こっても、 利用者が転落することを防げるという観点からです。どうしても前向きに介助したい場合は、フットサポート下の隙間 が路面に干渉しないことを確認しましょう。

## 参考要因(要因の例であり、これだけが正解ということではありません)

人:正しい介助方法を理解していなかった

モノ:フットサポートが低い位置にある車いすだった 管理:ねじのゆるみからフットサポートが下がっていた

# 福祉用具ヒヤリハット 研修教材(受講者用)

日付:	所属:	氏名:
H 13 '	7717-50	24 11 .


Case: 117

前向きで下りたところフットサポートが地面にひっかかり、転落しそうになる



## 場面の説明

前向きで下りたため、フットサポートが地面にぶつかってしまった

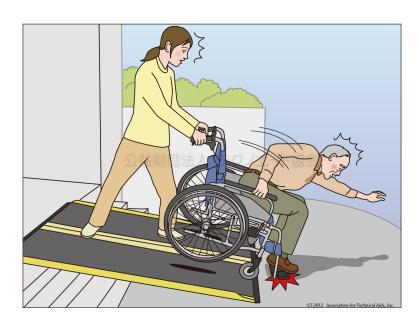

どのような要因が考えられますか?	どのような対策が必要でしょうか?
人(本人・介護者・関係者)の要因	
モノ(福祉用具)の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ